


wellsystem™

wellsystem™

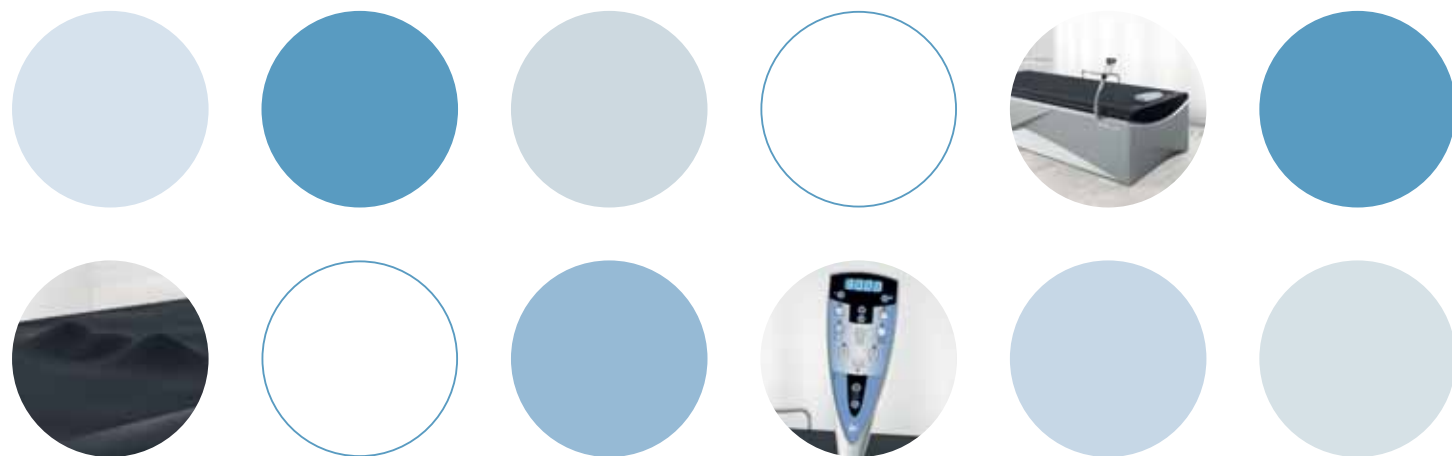

水按摩和水理疗二合一

医疗版 & 医疗版_PLUS // SPA系统



德国原装进口干式水疗按摩床医疗版&医疗版Plus

干式水疗按摩床&SPA理疗系统



© Copyright notice: The use and reprinting of the images shown is only permitted with written permission from WellSystem.

300002596




WellSystem GmbH // Koehlershohner Strasse // 53578 Windhagen // Germany
T +49 (0) 2224/818-257 // F +49 (0) 2224/818-254 // info@wellsystem.com // www.wellsystem.com
中国代理商: 上海逸莱实业有限公司 电话: 18516188695 www.well-system.cn



WELLSYSTEM 医疗版 AND WELLSYSTEM 医疗版_PLUS

概述

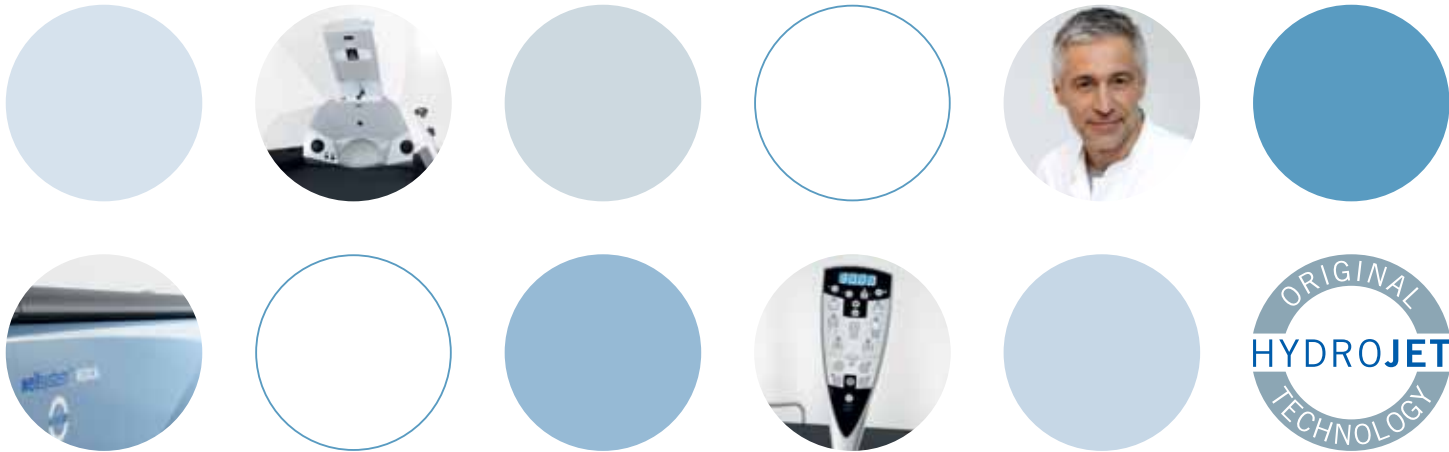

背部和关节疼痛，肌肉紧张，肌肉失衡，与生活压力有关的肌肉紧张，颈椎偏头痛。这些都是经常遇见的亚健康 and 慢性的不适症状，可通过独特的“干水按摩”疗法概念进行预防和治疗，从而专业地缓解这些不适症状。

自1992年以来，Wellsystem从著名的Hydrojet开始成功引入干式水按摩系统。除了其后继产品，技术先进的Well-System Medical干式水疗床是一种新开发的先进的水力按摩床，现已上市。两种系统都将水喷射按摩的力量与热敷和放松的温暖融为一体。加热到25至40度的水以0.5-4bar的压力均匀运动地喷向天然橡胶床的下侧。

Wellsystem Medical_Plus不仅获得了新的设计，而且更重要的是，它还提供了一系列新功能，例如不同类型的按摩，各种速度和压力水平，均可满足患者的需求。此外，还有六种治疗性按摩程序，这些程序由医学专家完美平衡和开发，并针对不同体长提供各种尺寸。所有功能都集成在易于使用的控制面板中。

Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus可用于多种适应症，因为该疗法可提供深层肌肉-

放松，增加血液循环和代谢功能，在缓解身体肌肉疼痛效果显著。

两种系统均获得了IIa级医疗器械指令（MDD）的批准，并且除了具有出色的治疗特性外，还提供可观的财务收益。

Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus的独特之处在于其高水平的操作性和用户舒适度，同时需要的空间很小，并且不需要其他人员。在整个应用过程中，患者也仍要穿衣服。可以使用Wellsystem_Spa轻松有效地增强这两个系统，以创建感官健康水疗中心。所有Well-system产品都为患者和员工提供了一个很好的机会，可确保患者忠诚度，同时以最小的努力最大化您的服务范围。

//与对经典按摩程序进行了合理的补充之后，本补充说明完全可以实现我们的初始想法和期望。 我们的患者显示出非常好的接受“Wellsystem”使用的效果，因此，康复理疗效果是决定性因素。 //

Dr. med. Wolfgang Veen
Doctor for Orthopaedics & Surgery, Sankt Augustin, Germany

WELLSYSTEM 医疗版 AND WELLSYSTEM 医疗版_PLUS

医疗级别

Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus将水的温热和压力与有益的相结合，创造出独特的治疗体验，并具有广泛的积极作用：

- 缓解疼痛
- 减少肌肉紧张
- 纠正肌肉失衡
- 改善肌肉张力
- 改善局部血液循环和新陈代谢
- 静脉和淋巴通畅
- 皮下组织松动
- 对促进神经系统修复有积极影响，对身体内脏器官也有很好的康复作用

机器可广泛应用于如下行业和场景：

- 背部疼痛
- 肌肉紧张
- 肌肉失衡
- 与压力有关的肌肉紧张
- 颈肩疼痛
- 纤维肌痛（轻度）
- 过度肌肉疲劳
- 脊柱可逆性功能障碍
- 颈椎和胸椎疾病，坐骨神经痛

此外，Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus为后续治疗措施（例如扩展，手动疗法或物理疗法）提供了理想的准备，并且非常适合在脊椎按摩疗法或其他康复辅助使用。

//有了WELLSYSTEM MEDICAL，您就可以为每位患者提供正确的治疗概念。WELLSYSTEMMEDICAL意味着全面，个性化的按摩-无需更改，无需后续操作。它非常容易使用。 //

Friedhem Kuhlmann博士，德国骨科医师，IGeL aktiv，02_2008

以下按摩程序可用于治疗重要的肌区域

- Programme 1 OB 1 - EX 4
- Programme 2 OB 1 - OB 4
- Programme 3 OB 1 - OB 2
- Programme 4 OB 3 - OB 4
- Programme 5 EX 1 - EX 4
- Programme 6 EX 1 - EX 3

OB1: 肩部/颈部: 斜方肌，提肌肩骨

OB2: 以胸椎骨为中心，以菱形肌和锯状肌后面表面.

OB3: 上腰段到腰三椎体，髂腰段中分

OB4/EX1: 伊里奥骨区

EX2: 臀部: 梨状肌，臀肌


EX3: 大腿背侧区域: 股二头肌，股直肌

EX4: 小腿肌肉: 腓肠肌，比目鱼肌


// WELLSYSTEM MEDICAL是一种特别温和的治疗形式，几乎可以用于SPINLA柱和主要关节的所有急性和慢性矫形手术恢复。 //

Friedhem Kuhlmann博士，德国骨科医师，IGeL aktiv，02_2008


Programme 1 OB 1 - EX 4

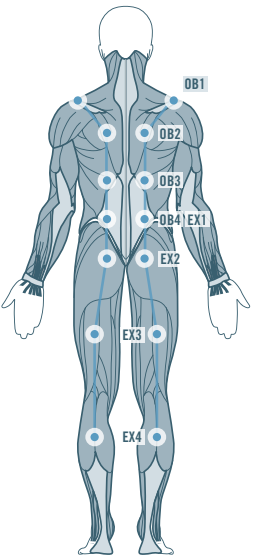


Programme 2 OB 1 - OB 4

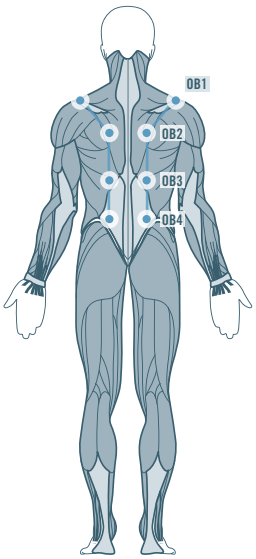


Programme 3 OB 1 - OB 2

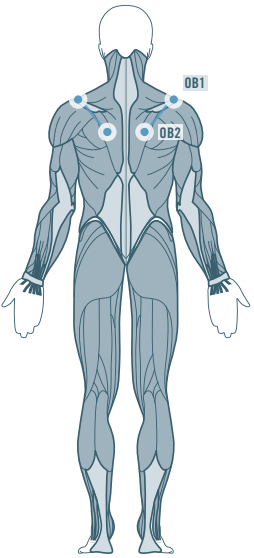


Programme 4 OB 3 - OB 4

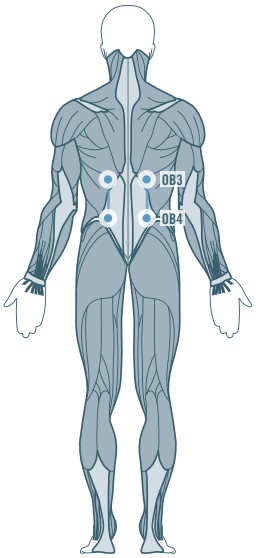


Programme 5 EX 1 - EX 4

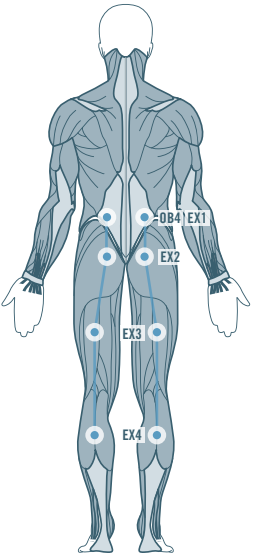

Programme 6 EX 1 - EX 3

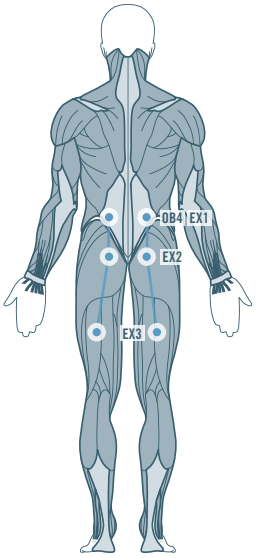

APPLICATION

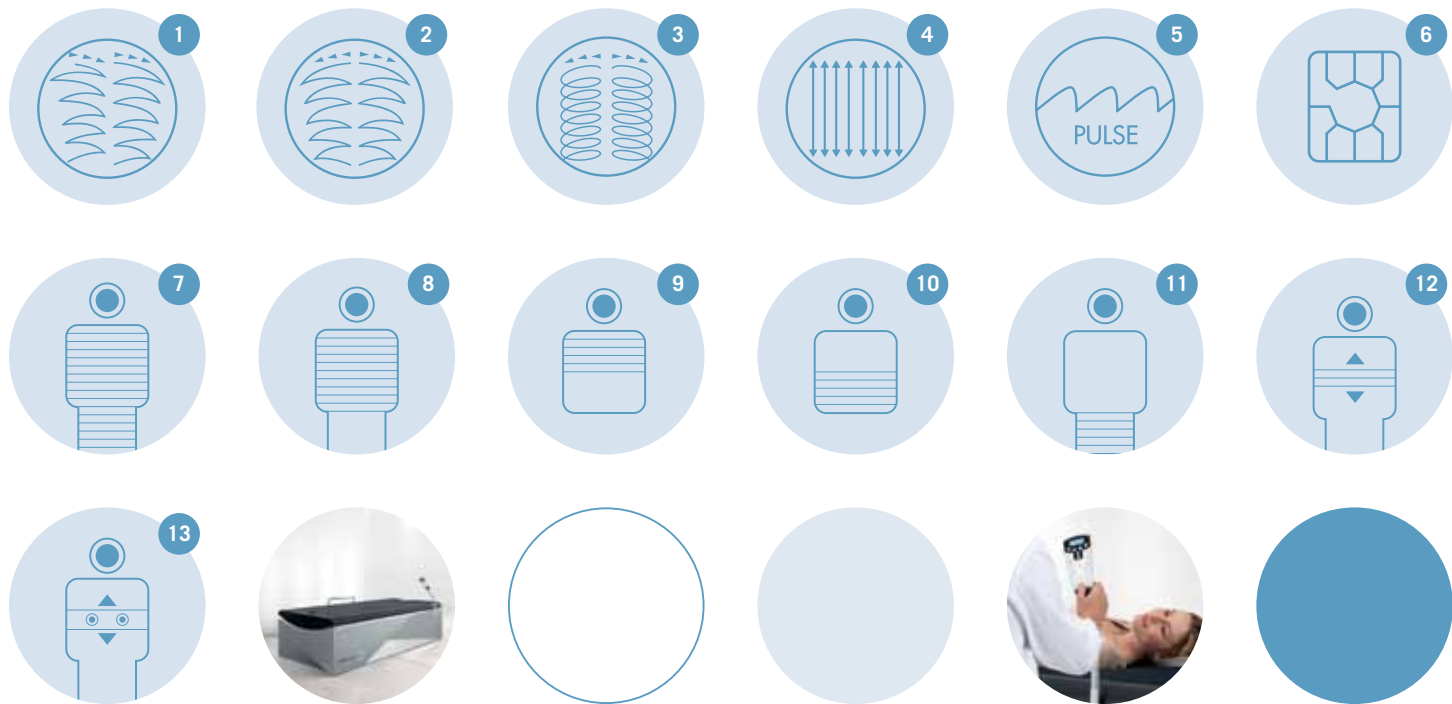

Wellssystem Medical和Wellssystem Medical_Plus充满约300升水，可将其加热到25至40摄氏度的舒适温度。两个喷嘴均匀的运动，在天然橡胶床的底部滑动。压力强度，按摩区域和按摩时间可以针对不同应用程序单独控制。该系统通过带有软触摸键盘的控制面板进行操作。简洁形象的图形按键使操作极其简单直接。

使用Wellssystem Medical，射流可以从头到脚以镜像弧线移动，也可以在单独设置的按摩区域（镜像按摩）移动。可以在两个设备上激活脉冲按摩。此外，Wellssystem Medical_Plus还提供平行，圆弧和平行冲程按摩选项。此外，Wellssystem Medical_Plus可以根据患者的身体高度灵活调整按摩并调节速度。两种系统的芯片卡上都有按摩程序。Wellssystem Medical_Plus还提供了6种完美平衡程序供您选择，这些程序已经集成到设备中。

还提供可自由编程的芯片卡，使您可以为两种设备存储定制的按摩时间，压力强度和按摩类型组合。Wellssystem Medical_Plus还使您能够将按摩喷嘴移动到精确定义的位置，并将这些位置作为程序保存到芯片卡中。

按摩类型

- 1 平行按摩
- 2 镜像按摩
- 3 环形按摩
- 4 平行行程按摩
- 5 脉冲按摩
- 6 程序选择

按摩区域

- 7 全身
- 8 背部
- 9 肩部
- 10 腰部
- 11 腿部
- 12 按摩选择
- 13 定点按摩



放松身心

WELLSYSTEM_SPA

紧张，头痛和偏头痛-日常生活的压力不仅仅具有生理上的痕迹：长期的压力会消耗能量和动力。 为了充分补偿应变，需要更长和更长的再生阶段。 心理也承受压力，阻止适当的休养。 最终，这可能导致倦怠。

Wellsystem_Spa可以将Wellsystem Medical和Wellsystem Medical_Plus轻松有效地将干水按摩转换为感官健康水疗中心。 在短时间内，您的患者可以放松并有效预防压力。

Wellsystem_Spa专为满足用户的个人需求而设计，它增强了干水按摩功能，包括了全方位的康复概念。 因此，它改善了人们的幸福感-使患者达到最佳康复状态。



WELLSYSTEM_SPA使用水，光，空气，颜色，香气和声音创造了一个放松的世界，以进行个性化的放松，需要最少的空间。



水

水，温暖，能量-还有更多！ Wellsystem_Spa通过Wellsystem Relax和Wellsystem Relax_Plus将干水按摩转变为所有感官的放松世界。使用者可以在治疗期间平静的开始和结束。



空气

Wellsystem_Spa使周围的空气电离，从而使活动空气中充满活性氧。这净化了空气，使得使用者在治疗期间特别享受新鲜的空气。



芳香疗法

如果需要，可以使用芳香剂添加Wellsystem_Spa的空气中。无论是苏打水，温暖的檀香，异国情调的柠檬草还是有香味的夏日草地，干水按摩都将带您穿越繁华的自然风光！



胶原蛋白光谱

Wellsystem_Spa利用波长为633 nm的可见红光（胶原蛋白白光）深深穿透面部区域。光线刺激皮肤成纤维细胞的新陈代谢，促进胶原蛋白和弹性蛋白的形成。这可以增强结缔组织并防止皮肤过早老化。它还可以长期改善皮肤肤色，减少皱纹和细纹。



多彩光谱

在Wellsystem_Spa中，色彩的柔和营造了一种舒缓的氛围，用户可以在其中放松身心并从日常生活的紧张情绪中深度放松！



音乐

通过Wellsystem_Spa提供的轻松音乐或在聆听个人喜爱的播放列表时抛弃日常护理，一切皆有可能。Wellsystem_Spa具有两个SD卡插槽和一个用于所有常见MP3播放器的适配器。

TECHNOLOGY

// COMPLAINTS SUCH AS THOSE ARISING FROM THE NECK-SHOULDER SYNDROME OR INTERVERTEBRAL DISC DAMAGE CAN BE (...) ALLEVIATED. IN ADDITION, PATIENTS SUFFERING FROM STRESS OR CHRONIC FATIGUE ALSO BENEFIT FROM THE TREATMENT. THIS FORM OF THERAPY IS ALSO SUITABLE FOR OSTEOPOROSIS PATIENTS. //

Dr. Friedhelm Kuhlmann, Orthopaedist, Germany, IGeL aktiv, 02_2008



WELLSYSTEM 医疗版_PLUS

工作特性

- 带软触键盘的控制面板
- 显示按摩时间
- 显示压力设定
- 显示身体高度设定
- 显示按摩速度设定
- 枕头
- 可选按摩类型:
 - 平行按摩
 - 镜像按摩
 - 环形按摩
 - 平行行程按摩
 - 脉冲按摩
- 可选的按摩区域:
 - 全身, 背部, 肩部, 腰部, 腿部
 - 分区按摩, 自由选择区域
 - 定点按摩, 自由选择区域
- 6种预设治疗性按摩程序: :
 - 全身
 - 整个背部
 - 上背部
 - 下背部 (腰部区域)
 - 臀部/大腿
 - 臀部/整个腿部

(参数取决于技术和设计的修改以及可用性。)

舒适功能 [额外添加非标配]

- Medical_Plus芯片卡包装
- 可自由编程的芯片卡, 用于单独编程和分阶段编程
- 床单
- 延长垫

技术数据和尺寸 [标准]

- 最长可设置时间: 45分钟
- 最大允许承载重量: 210KG
- 压力可调范围: 0.5-4 bar
- 按摩速度可调范围: 5-30
- 身高可调范围: 45-65 cm from C7-S1
- 水温可调范围: 25-40 °C
- 设备尺寸 (L x W x H): 2150 x 1100 x 570 mm
- 床面(L x W): 1950 x 800 mm
- 未加水设备毛重: 168 kg
- 加水后设备毛重: 472 kg
- 可加水容量: 304 l
- 功率: 2800 W
- 电源电压 / 保险丝: 220-240 V / 16A
- 用于服务访问和所有商用控制系统的LAN接口
- EMC 测试报告 (电磁兼容测试报告)
- CE 认证
- 医疗器械指令MDD, IIa级

WELLSYSTEM 医疗版

OPERATING CHARACTERISTICS

- 带软触键盘的控制面板
- 显示按摩时间
- 显示压力设定
- 枕头
- 可选按摩类型:
 - 镜像按摩
 - 脉冲按摩
- 可选的按摩区域:
 - 全身, 背部, 肩部, 腰部, 腿部
 - 分区按摩, 自由选择区域
 - 定点按摩, 自由选择区域

舒适功能 [额外添加非标配]

- Medical_Plus芯片卡包装
- 可自由编程的芯片卡, 用于单独编程和分阶段编程
- 床单
- 延长垫

TECHNICAL DATA AND DIMENSIONS [STANDARD]

- 最长可设置时间: 45分钟
- 最大允许承载重量: 210KG
- 压力可调范围: 0.5-4 bar
- 水温可调范围: 25-40 °C
- 设备尺寸 (L x W x H): 2150 x 1100 x 570 mm
- 床面(L x W): 1950 x 800 mm
- 未加水设备毛重: 168 kg
- 加水后设备毛重: 472 kg
- 可加水容量: 304 l
- 功率: 2800 W
- 电源电压 / 保险丝: 220-240 V / 16A
- 用于服务访问和所有商用控制系统的LAN接口
- EMC 测试报告 (电磁兼容测试报告)
- CE 认证
- 医疗器械指令MDD, IIa级

(参数取决于技术和设计的修改以及可用性。)

